

explore 5

User Guide



Humanware™

see things. differently.

Электронный ручной видеоувеличитель Explore 5

Руководство пользователя

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Подключите USB-кабель к источнику питания для зарядки.
2. Держите Explore 5 экраном к себе. Убедитесь, что тактильный значек USB расположен на стороне разъема USB, обратной от экрана. Аккуратно подключите кабель в порт для зарядки, расположенный на левой стороне устройства, и вставьте источник питания в розетку.

Важно: Соблюдайте осторожность при вставке кабеля в порт зарядки.

3. Дайте устройству полностью зарядиться. В процессе зарядки устройство будет нагреваться — это нормально.
4. После окончания зарядки, аккуратно отсоедините кабель от устройства.
5. Чтобы начать пользоваться устройством, нажмите кнопку **Питания**.

СОДЕРЖАНИЕ

Начало работы	3
Глава 1 – краткий обзор.....	1
Введение	1
Комплект поставки.....	2
Внешний вид	2
Глава 2 – Работа с explore 5	3
Выключение explore 5.....	5
Режим увеличителя.....	5
Изменение увеличения.....	5
Изменение контраста.....	5
Линии и маски чтения	6
Автофокус.....	6
Стоп-кадр.....	7
Изменение увеличения стоп-кадра	8
Режим галереи.....	8

Захват и сохранение изображений в галерею	8
Доступ к галерее	8
Удаление из галереи	9
Подключение внешнего экрана	9
Глава 3 – перенос изображений на компьютер	10
Глава 4 – настройка explore 5	11
Вход, выбор и изменение настроек	11
Просмотр версий прошивки и оборудования	13
Восстановление заводских настроек	14
Глава 5 – обновление explore 5	14
Глава 6 – зарядка explore 5	15
Глава 7 – устранение неполадок	17
Explore 5 не включается	17
Экран темный	17

explore 5 выключается после бездействия	18
Цвета определяются с трудом.....	18
Сильно бликует	18
explore 5 не отвечает	18
Другие проблемы	19
Глава 8 – уход за explore 5	19
Очистка ЖК дисплея	19
Очистка внешних поверхностей explore 5	20
Приложение А – правила техники безопасности	21
Приложение В – технические характеристики ..	22
Приложение С – клиентская поддержка.....	23
Приложение D – Информация FCC	24
Приложение E – гарантия.....	25

ГЛАВА 1 – КРАТКИЙ ОБЗОР

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку самого маленького, портативного и легкого в использовании ручного видеоувеличителя Explore 5 с большим удобным 5-дюймовым экраном от HumanWare.

Будучи сами пользователями увеличителей, мы в компании HumanWare знаем, что помимо обеспечения наилучшего качества изображения, хороший увеличитель должен быть прост в обращении, портативен, удобен в использовании и готов к работе в любое время. Ваш Explore 5 был разработан именно для этого. Мы гордимся тем, что предлагаем вам качественный продукт, который будет отвечать вашим потребностям и ожиданиям.

Перед использованием устройства, внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации и безопасности, описанные в данном руководстве. При возникновении любых вопросов по вашему устройству, обратитесь в компанию «Элита Групп», воспользовавшись контактной информацией, расположенной в конце данного руководства.

Поздравляем с приобретением. С ним Вы начнете читать этот мелкий текст уже через считанные секунды.

Авторские права 2019 Технологии HumanWare Inc., все права защищены. Ни какая часть этого документа не может быть воспроизведена или распространена в любой форме или любым способом, или сохранена в

базе данных, или поисковой системе, без предварительного письменного разрешения от Технологии HumanWare Inc.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Основная коробка

Электронный видеоувеличитель
Explore 5
Чехол для ношения
USB-зарядное устройство
USB-кабель
Ремешок
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Салфетка из микрофибры
HDMI-кабель.

ВНЕШНИЙ ВИД


Передняя панель

1. Кнопка контраст
2. Кнопка повышения увеличения
3. Кнопка понижения увеличения
4. Кнопка стоп-кадра
5. Крепежное отверстие

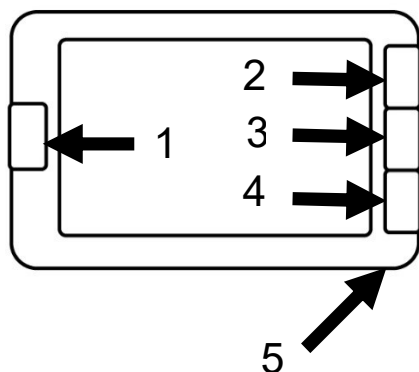


Задняя панель

1. Кнопка питания
2. Камера
3. Подсветка
4. Рукоятка

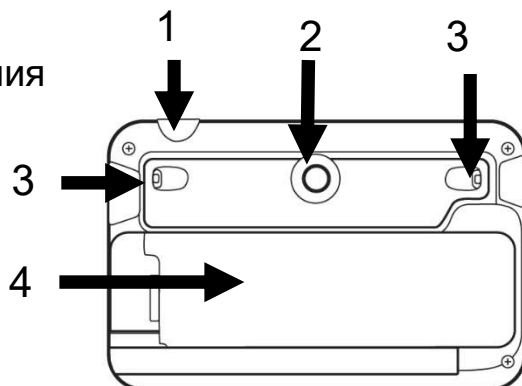


Левый край

1. Порт USB
(для кабеля зарядки)

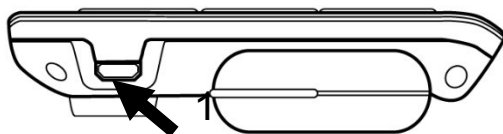


Правый край

1. Выход HDMI видео
(на внешний экран)

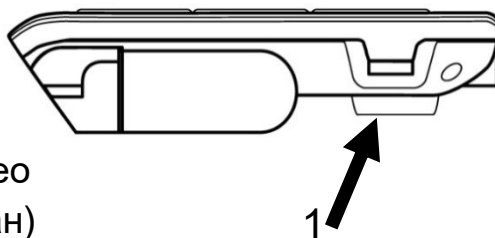


ГЛАВА 2 – РАБОТА С EXPLORE 5


Для включения увеличителя, просто нажмите кнопку **Питания**, расположенную справа, на верхнем крае устройства. При этом держать устройство можно за края, как планшет.

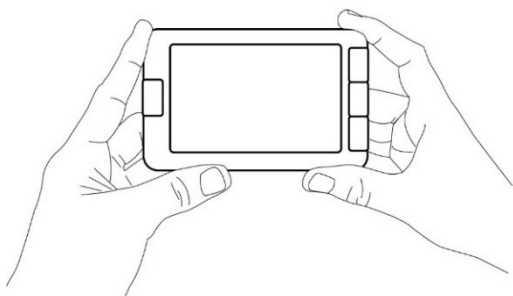

Вы также можете включить устройство, просто откинув рукоятку в сторону, и держать, как обычную лупу.

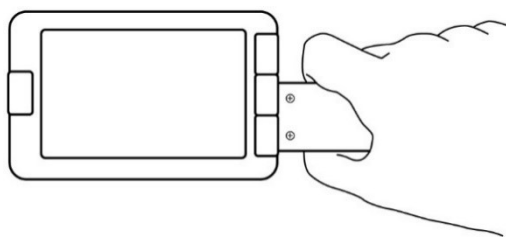

Устройство также можно использовать в режиме «свободные руки» если откинуть рукоятку вертикально и поместить его над читаемым материалом.

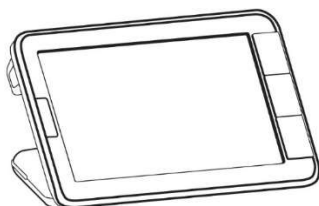

Через несколько секунд, Explore 5 выведет изображение с камеры. Это режим увеличителя.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ EXPLORE 5

Для выключения устройства, просто нажмите кнопку **Питания**. Также, если открыта рукоятка увеличителя, то можно выключить устройство простым поворотом рукоятки в положение «закрыто».

РЕЖИМ УВЕЛИЧИТЕЛЯ

Режим увеличителя – это основной режим работы Explore 5. Для чтения, просто держите устройство над рассматриваемым материалом.

ИЗМЕНЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ

Для повышения увеличения, нажмите кратко или с удержанием кнопку **Увеличение+**, пока изображение не станет подходящего размера. Аналогично, можно понизить увеличение, нажав кратко или с удержанием кнопку **Увеличение-** до достижения нужного размера изображения.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАСТА

Explore 5 позволяет вам настроить контраст, наиболее подходящий вашим потребностям и предпочтениям. Кратко нажимайте кнопку **Контраст** для смены контраста, пока не достигнете наиболее удобного для себя.

Доступные контрастные режимы приведены ниже:

Полноцветный, Черный на белом, Белый на черном, Черный на желтом, Желтый на черном.

Доступны также другие контрастные режимы:

Черный на оранжевом, Оранжевый на черном, Черный на голубом, голубой на черном, Черный на фиолетовом, Фиолетовый на черном, Черный на зеленом, Зеленый на черном, Синий на желтом, Желтый на синем, Белый на синем, Синий на белом.

Вы можете выбрать любимые контрастные режимы в меню настроек.

ЛИНИИ И МАСКИ ЧТЕНИЯ

В Explore 5, для облегчения чтения, можно добавить поверх изображения горизонтальные линии или маски.

Чтобы добавить или убрать линии чтения, одновременно нажмите и удерживайте кнопки **Контраст** и **Увеличение+**.

Чтобы добавить или убрать маски чтения, одновременно нажмите и удерживайте кнопки **Контраст** и **Увеличение-**.

АВТОФОКУС

Explore 5 оснащен автофокусом, который может быть **заблокирован** или **разблокирован** через меню.

По умолчанию он разблокирован. Когда автофокус разблокирован, тогда Explore 5 динамически подстраивает фокус к рассматриваемому объекту.

При блокировке автофокуса и использовании увеличителя в настольном положении, Explore 5 будет сохранять текущее фокусное расстояние независимо от его перемещения.

При блокировке автофокуса и удержании увеличителя, как планшет, или за рукоятку, Explore 5 будет сохранять фокусное расстояние примерно 6 см перед собой.

Примечание: Для сброса фокуса, когда автофокус заблокирован, просто 1 раз нажмите кнопку **Стоп-кадр** для фиксации изображения, и еще раз **Стоп-кадр** для возврата в режим увеличителя.

Примечание: по умолчанию, автофокус заблокирован в режиме на подставке.

СТОП-КАДР

Explore 5 позволяет вам зафиксировать изображение в режиме увеличителя для удобства чтения, что особенно полезно при чтении этикеток или надписей на продуктах на верхних полках в магазине. Для фиксации изображения, просто нажмите кнопку **Стоп-кадр**, направив увеличитель на то, что хотите прочитать. В соответствии с ориентацией увеличителя

будет сделан снимок, который будет находиться на экране до тех пор, пока вы не решите вернуться в режим увеличителя.

Для возврата в режим увеличителя, просто снова нажмите кнопку **Стоп-кадр**.

ИЗМЕНЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОП-КАДРА

Для повышения увеличения зафиксированного изображения, коротко нажимайте или удерживайте нажатой кнопку **Увеличение+** до достижения подходящего размера изображения. Аналогично вы можете понизить увеличение, нажимая коротко или с удержанием кнопку **Увеличение-** пока не удовлетворитесь размером изображения.

РЕЖИМ ГАЛЕРЕИ

ЗАХВАТ И СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ГАЛЕРЕЮ

Чтобы сохранить "живое" изображение или стоп-кадр в Галерею, просто нажмите и удерживайте кнопку стоп-кадра полсекунды в режиме увеличителя. На экране ненадолго возникнет сообщение «Сохранено», означающее, что изображение сохранено в Галерею Explore 5.

ДОСТУП К ГАЛЕРЕЕ

Вы можете войти в Галерею Explore 5 через меню. Также, вы можете войти в Галерею просто одновременно нажав и удерживая кнопки **Стоп-кадр** и **Контраст** в режиме увеличителя.

Для навигации по Галерее, нажимайте кнопки **Увеличение+** и **Увеличение-**.

Для выхода из Галереи, просто нажмите кнопку **Контраст**.

УДАЛЕНИЕ ИЗ ГАЛЕРЕИ

Чтобы удалить изображение из Галереи, войдите в нее, нажав одновременно **Стоп-кадр** и **Контраст** в режиме увеличителя.

Кнопками **Увеличение+** и **Увеличение-** перейдите к изображению, которое хотите удалить, затем нажмите и удерживайте кнопку **Стоп-кадр**.

Для подтверждения удаления, кнопкой **Увеличение+** выберите «Удалить». Вы можете отменить, также выбрав «Отмена» кнопкой **Увеличение-**.

Чтобы сразу удалить все изображения, войдите в меню и выберите пункт «Удалить галерею».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ЭКРАНА

Для более крупного изображения, Explore 5 может выводить его на внешний дисплей, такой как ТВ. Для

этого, просто подключите Explore 5 HDMI-кабелем к внешнему дисплею. Список поддерживаемых форматов HDMI можно найти в приложении В.

Примечание: Вам необходимо перезапустить Explore 5 после отключения HDMI-кабеля, чтобы перезарядить его.

ГЛАВА 3 – ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЙ НА КОМПЬЮТЕР

Для передачи изображений Галереи, сохраненных в Explore 5, на ваш ПК, подключите увеличитель к ПК USB-кабелем, входящим в комплект. Вы должны увидеть появившееся на устройстве сообщение «Подключение к компьютеру». Теперь вы можете копировать и вставлять изображения из Галереи на ПК при помощи компьютерного файлового менеджера.

Когда устройство подключено к компьютеру, оно работает так же, как, внешний накопитель USB и доступно под именем «Explore5». Все изображения Галереи расположены в папке Images на Explore 5.

Во время копирования или удаления изображений с устройства, ни в коем случае не отключайте USB-кабель, так как в этом случае некоторые изображения могут быть потеряны.

ГЛАВА 4 – НАСТРОЙКА EXPLORE 5

ВХОД, ВЫБОР И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

Нажмите и удерживайте кнопку **Контраст** для входа в меню. Перемещайтесь по меню вверх, нажимая кнопку **Увеличение+** и вниз, нажимая **Увеличение-**.

Для выбора элемента, нажмите **Стоп-кадр**. Для возврата на предыдущий уровень меню, нажмите **Контраст**, или нажмите и удерживайте **Контраст** для возврата в режим увеличителя.

Меню содержит следующие пункты:

- **Галерея** – вход в галерею изображений
- **Автофокус**: Разблокирован*, Заблокирован (блокировка в режиме с подставкой)
- **Яркость экрана** – изменение яркости, уровни от 1 до 9 (8*)
- **Автовыключение** – выбор, периода до автоматического отключения устройства: 1 мин, 2 мин, 5 мин*, 10 мин
- **Избранный масштаб** – задает уровень начального увеличения при включении устройства:
Предыдущий (уровень при последнем выключении), от 2х* до 22х

- **Контраст (подменю)**

- **Предпочитаемый контраст** - выбор начального цветового режима при включении Explore 5: Предыдущий* (режим при последнем выключении), Цвет, Список включенных контрастов.
- **Меню** - изменение цветов меню: Черный на белом, Белый на черном, Черный на желтом, Желтый на черном, Черный на оранжевом, Оранжевый на черном, Черный на голубом, Голубой на черном, Черный на фиолетовом, Фиолетовый на черном, Черный на зеленом, Зеленый на черном, Синий на желтом, Желтый на синем, Белый на синем, Синий на белом.
- **Включенные контрасты** – выбор включенных пар цветов для режима увеличителя (отмеченные пары цветов будут доступны также в меню предпочтительного контраста): Черный на белом, Белый на черном, Черный на желтом, Желтый на черном, Черный на оранжевом, Оранжевый на черном, Черный на голубом, Голубой на черном, Черный на фиолетовом, Фиолетовый на черном, Черный на зеленом, Зеленый на черном, Синий на желтом, Желтый на синем, Белый на синем, Синий на белом.

- **Подсветка:** Включено*, Низкий, Выключено
- **Язык:** Английский (US)*, Английский (UK), Французский, Испанский, German, Dutch, Датский, Польский, Португальский (Португалия), Португальский (Бразилия), Норвежский (Bokmål), Итальянский, Шведский, Финский, Русский, Чешский, Японский, Корейский, Исландский, Эстонский, Турецкий, Литовский, Венгерский, Латвийский, Арабский, Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный), Иврит, Грузинский, Фарси, Курдский.
- **Дисплей:** 50 Гц, 60 Гц*
- **Удалить Галерею**
- **Сброс настроек**
- **Об устройстве** - Просмотр/Настройка информации об устройстве: Дата и время, Программное обеспечение, Оборудование, Серийный номер.

ПРОСМОТР ВЕРСИЙ ПРОШИВКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

Для просмотра версий прошивки и оборудования Explore 5, войдите в меню, нажав и удерживая **кнопку Контраста**.

Перейдите вниз на «Об устройстве» кнопкой **Увеличение-** и нажмите **Стоп-кадр** для вывода текущих версий прошивки и оборудования Explore 5.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Для возвращения устройства к заводским настройкам, войдите в меню, нажав и удерживая **кнопку Контраста**. Перейдите вниз на «Сброс настроек» кнопкой **Увеличение-** и нажмите **Стоп-кадр**. Выберите «Да» и снова нажмите **Стоп-кадр** для подтверждения.

ГЛАВА 5 – ОБНОВЛЕНИЕ EXPLORE 5

Перейдите по ссылке:

<http://www.humanware.com/support/explore5> и скачайте последнюю версию прошивки Explore 5. Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля, входящего в комплект. С помощью проводника компьютера, скопируйте загруженный файл непосредственно в корневую папку на explore 5. Когда копирование завершится, отключите USB-кабель от компьютера. Включите Explore 5. Устройство должно само автоматически обновиться.

ГЛАВА 6 – ЗАРЯДКА EXPLORE 5

ВАЖНО: во время зарядки аккумулятор нагревается, это нормально. Не заряжайте аккумулятор вблизи источников тепла.

Для зарядки аккумулятора от бытовой электрической розетки:

- Подключите USB-кабель к адаптеру питания от Explore 5. Аккуратно подключите USB-кабель к устройству и вставьте адаптер в розетку.
- Дайте устройству полностью зарядиться. Это должно занять примерно 3,5 часа при условии полной разрядки.

Для зарядки аккумулятора от компьютера:

- Подключите USB-кабель к устройству а другой его конец к компьютеру.

В процессе зарядки, следующий значок отобразится на короткое время, когда аккумулятор начинает заряжаться или устройство включается.



Значок молнии означает, что устройство заряжается. Число, расположенное правее, обозначает проценты оставшегося заряда аккумулятора.

Из-за низкого тока, зарядка от USB-порта ПК может быть дольше. В некоторых случаях может не заряжаться вообще, это связано с недостатком мощности порта ПК. Наилучшим способом зарядки увеличителя является использование USB-кабеля с зарядным адаптером из комплекта, подключенным к бытовой электрической розетке.

Хотя это может увеличить время зарядки, но устройством в это время можно пользоваться.

Обратите внимание, что если аккумулятор полностью разряжен или устройством не пользовались длительное время, возможна задержка в несколько минут перед тем, как обнаружится активность устройства. Это вполне нормально.

Также отметим, что, как любое электронное устройство, Explore 5 будет нагреваться в процессе работы или зарядки – это нормально. Хотя риска нет, рекомендуется избегать продолжительного контакта с серой металлической панелью на задней стороне устройства, которая выполняет функцию радиатора.

Меры безопасности при использовании аккумулятора:

- Не разбирайте и не изменяйте аккумулятор.

- Используйте только зарядный адаптер, заявленный HumanWare.
- Имеется риск перегрева, воспламенения или взрыва если аккумулятор помещен в огонь, нагрет, подвержен резкому, сильному сжатию, взаимодействует с водой, или если его контакты замкнуты.

ГЛАВА 7 – УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

EXPLORE 5 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

Нажмите и удерживайте кнопку **Питание**. Если устройство все равно не включается, возможно, следует зарядить аккумулятор.

подключите USB-кабель от адаптера питания в розетку или только USB-кабель в работающий ПК. При полном разряде аккумулятора, до появления признаков активности потребуется несколько минут.

См **Главу 6** для получения дополнительной информации.

ЭКРАН ТЕМНЫЙ

Если устройство лежит на столе или на другой плоской поверхности, то изображение может иметь

черный цвет. Поднимите увеличитель чтобы выяснить в этом ли причина черноты на экране.

Если проблема не решена, перезагрузите устройство.

EXPLORE 5 ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ БЕЗДЕЙСТВИЯ

Это нормальное поведение, направленное на сохранение аккумулятора. По умолчанию, Explore 5 выключится через 5 минут бездействия. Возможно настроить таймер автоотключения на 1, 2, 5 или 10 минут.

ЦВЕТА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ С ТРУДОМ

Сначала убедитесь в достаточном окружающем освещении.

Выберите другую цветовую комбинацию, нажимая кнопку **Контраст** в режиме увеличителя.

СИЛЬНО БЛИКУЕТ

Поверните рассматриваемый предмет под другим углом для снижения бликов.

EXPLORE 5 НЕ ОТВЕЧАЕТ

Убедитесь, что Explore 5 не подключен к источнику питания через USB-кабель; если кабель не вставлен в

устройство. Около 10 секунд удерживайте нажатой кнопку **Питание**. Произойдет выключение. Теперь нажмите кнопку Питание на 1 секунду, чтобы снова включить Explore 5.

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ

Восстановление заводских настроек из меню.

Войдите в меню, нажав и удерживая кнопку **Контраст**.

Кнопкой **Увеличение** перейдите вниз на «Сброс настроек» и нажмите **Стоп-кадр**. Выберите Да и снова нажмите **Стоп-кадр** для подтверждения сброса настроек.

ГЛАВА 8 – УХОД ЗА EXPLORE 5

ОЧИСТКА ЖК ДИСПЛЕЯ

Убедитесь, что устройство выключено и ни к чему не подключено.

Убедитесь, что Вы используете только салфетки из микрофибры, как из комплекта поставки Explore 5.

Салфеткой из микрофибры осторожно, без нажима протрите ЖК дисплей.

Если Вы решили применить жидкий очиститель, то убедитесь, что он подходит для ЖК дисплеев.

Дистиллированная вода, изопропиловый спирт и растворы уксуса (не более 10%) являются безопасными чистящими жидкостями для ЖК дисплея.

Используйте минимум жидкости для предотвращения попадания ее внутрь устройства. При проникновении жидкости, возможно повреждение устройства. Убедитесь, что на экране не осталось жидкости. Повторите предыдущие шаги на наиболее трудноудаляемых пятнах.

НЕ используйте хозяйственные очистители для очистки Explore 5.

НЕ распыляйте никакие жидкости прямо на ЖК дисплей.

НЕ применяйте чистящие средства, содержащие этиловый спирт, этиловую кислоту, аммиак, ацетон или метилхлорид.

НЕ применяйте бумажные полотенца для очистки ЖК дисплея.

ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ EXPLORE 5

Убедитесь, что устройство выключено и отсоединено.

Если необходимо, применяйте слегка влажную ткань для очистки внешних поверхностей устройства.

Убедитесь, что на устройстве не осталось никакой жидкости. Повторите предыдущие шаги на наиболее трудноудаляемых пятнах.

НЕ применяйте абразивные материалы, спреи, спирт или растворители для очистки поверхностей Explore 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ А – ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не следует направлять в глаза свет от светодиодов, расположенных на задней стороне увеличителя.

НЕ допускайте нахождения устройства вблизи воды, в воде, а также в местах с высокой влажностью.

Выключайте Explore 5 перед его очисткой.

Применяйте только кабели, поставляемые в комплекте с Explore 5.

Аккумулятор:

В Explore 5 установлен перезаряжаемый литиево-ионный (Li-Ion) аккумулятор. Его замену должен выполнять специалист, квалифицированный в HumanWare.

- Не пользуйтесь устройством и не оставляйте его вблизи источников тепла и огня. Не храните в местах с повышенной температурой.
- Заряжайте аккумулятор ТОЛЬКО при помощи USB-совместимых источников питания.

- Не разбирайте и не изменяйте устройство.
- Не погружайте устройство в воду, не давайте ему намокать.
- НЕ ударяйте и не кидайте устройства.
- НЕ прокалывайте устройство и не ударяйте острыми предметами или молотком.
- Если целостность аккумулятора нарушилась и жидкость из него попала вам в глаза, не трите их. Вместо этого, промойте их чистой проточной водой и немедленно обратитесь за помощью к медикам чтобы предотвратить травму
- Если нарушилась целостность аккумулятора и он вступил в контакт с кожным покровом, немедленно промойте это место чистой проточной водой для предотвращения травмы.

ПРИЛОЖЕНИЕ В – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 89 x 139.4 x 21.3 мм

Экран: ЖК, 5 дюймов, WVGA (800 x 480)

Вес: 228 г.

Входное питание: Разъем Micro USB, 5 В.

Максимальный ток 1,5 А.

Время работы от аккумулятора: 3 ч.

Время зарядки: 3,5 ч (если выключено), 4,75 ч (если включено)

Совместимость с видео высокой четкости:

Поддержка следующих форматов видео высокой четкости:

1280x720p 60 Гц, 50 Гц

1920x1080p 60 Гц, 50 Гц, 24 Гц

1920x1080i 60 Гц, 50 Гц

Эмуляция DVI не поддерживается.

Рабочие условия:

Температура: 10 °С - 40 °С

Влажность: 20% - 80%

Условия хранения и транспортировки:

Температура: -20 °С - +60 °С

Влажность: 10% - 95%

ПРИЛОЖЕНИЕ С – КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической поддержки, обратитесь в офис или представительство HumanWare рядом с Вами.

Общий: support@humanware.com

Северная Америка: 1 (800) 722-3393

us.support@humanware.com

Европа: (0044) 1933 415 800

eu.support@humanware.com

Австралия / Азия: (02) 9686 2600

au.sales@humanware.com

РФ и страны СНГ: 8(800) 775-92-31

support@elitagroup.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ D – ИНФОРМАЦИЯ FCC

Заявление FCC:

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Операция подчиняется следующим двум условиям: (1) Устройство не может создавать вредных помех; (2) Устройство должно принимать любые поступающие помехи, включая те, которые могут вызывать нежелательные действия.

Предупреждение FCC:

Изменения или модификации, явно не одобренные группой ответственной за соответствие, могут лишить пользователя возможности работать с устройством.

Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызывать помехи в радиокommunikациях. Однако, не гарантируется, что помехи не возникнут в отдельных случаях. Если это оборудование вызывает помехи в радио или

телевизионном приеме, что можно проверить, выключив и включив устройство, то рекомендуется устранить помехи одним из следующих способов:

—Переориентировать или переместить принимающую антенну.

—Увеличить расстояние между устройством и приемником.

—Подключить устройство в розетку, отличную от той, в которую подключен приемник.

—Обратитесь за помощью к Вашему дилеру или теле-радио-мастеру.

Примечание: Это устройство было протестировано на периферийных устройствах с помощью экранированных кабелей. С устройством необходимо использовать экранированные кабели для обеспечения соответствия.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е – ГАРАНТИЯ

HumanWare гарантирует, что у Explore 5, работающего с даты покупки, не возникнет никаких дефектов материалов и сборки в течение 1 года, если иное не требуется законодательством страны или региона покупки.

Эта гарантия не подлежит передаче и применяется во всех случаях, когда повреждение не является следствием неправильного использования, неаккуратного или небрежного обращения. Неправильным является использование устройства, отличное от описанного в данном руководстве. Ни при каких обстоятельствах, HumanWare или дистрибьютеры не несут ответственности за вытекающие из этого косвенные убытки.

Гарантийный ремонт или замена не производится без копии чека на покупку устройства, приложенного к нему. Пожалуйста, сохраняйте оригинал чека. При возврате устройства, пожалуйста, используйте оригинальную упаковку.

[Окончание документа VER-17-2019-10-18]

**Поддержка пользователей на территории
России и стран СНГ:**

Компания "Элита Групп"

www.elitagroup.ru

support@elitagroup.ru

+7 (495) 748-96-77,

8 (800) 775-92-31 (многоканальный)